


BLAUPUNKT

BP X1100

מדריך למשתמש

מכשיר עיסוי לעיניים

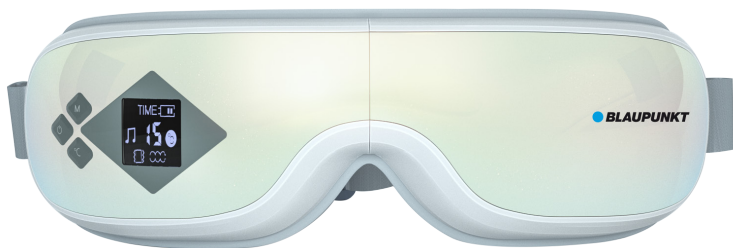

Enjoy it.

תודה שרכשתם את המכשיר שלנו. קראו בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש ושמרו עליו לשימוש בעתיד.


הקדמה

מכשיר העיסוי החכם הזה עושה שימוש בעיקרון המרידיאנים (מסלולי אנרגיה – צ'י) מהרפואה הסינית, ומשלב אותו עם טכנולוגיית שבבים זעירים, על מנת לשפר את זרימת הדם מסביב לעיניים באמצעות רטט חמים ועדין, וגירוי נקודות אקופרסורה מסביב לעין. בנוסף תוכלו ליהנות במהלך העיסוי ממוזיקה מרגיעה מהרמקול המובנה במכשיר.

תכונות

- תצוגת HD
- חום שמיוצר בעזרת גרפן
- אפשרות לכוונון טמפרטורה
- אפשרות לכוונון מצב
- סוללת ליתיום יון 1650 mAh
- דופן כפולה לכריות האוויר

מבנה

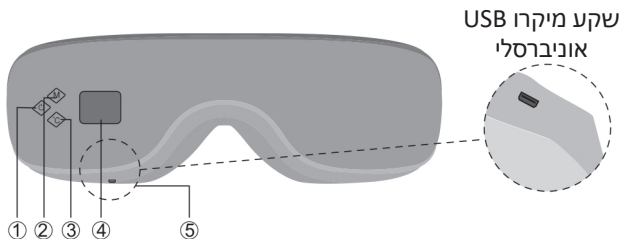

- 1 הפעלה/כיבוי/התחלה/השהיה
- 2 מתג מצב עיסוי באוויר/למעלה/הגברת עוצמת שמע
- 3 מתג מצב טמפרטורה/למטה/החלשת עוצמת שמע
- 4 מסך HD LCD
- 5 שקע טעינה

לפני השימוש

ודאו שהמכשיר טעון. אם המתח בסוללה נמוך ואם אי אפשר להפעיל אותו, טענו אותו לפני השימוש. ודאו שניתקתם את מתאם המתח לאחר הטעינה, כדי למנוע טעינה לאורך זמן רב מדי.

טעינה

1. חברו את מתאם המתח לשקע ה-USB במכשיר.
2. במהלך הטעינה נורית הטעינה תאיר באור אדום, וכאשר הסוללה טעונה במלואה היא תאיר באור כחול (או שסמל הסוללה המלאה יוצג במסך).
3. במהלך הטעינה, המכשיר אינו פועל (בטעינה במצב עבודה, תופעל תוכנית הגנה עצמית והמכשיר יפסיק לעבוד באופן אוטומטי).
4. המכשיר מופעל באמצעות סוללה נטענת מובנית, וזמן הטעינה הוא 3-4 שעות.
5. המכשיר מתריע על מתח נמוך בסוללה במהלך השימוש. הפסיקו את השימוש וטענו את הסוללה.

מספר שיטות טעינה

שיטות טעינה:

- חיבור USB של מחשב נייד
- מתאם מתח סטנדרטי (מומלץ)

זמן עבודה

המכשיר פועל למשך 15 דקות כברירת מחדל. אם ברצונכם להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יותר, עליכם להפעיל אותו פעם נוספת.

1. לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה  למשך 3 שניות כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. לחצו על לחצן ההפעלה  כדי לעבור בין המצבים. יש חמישה מצבים: מצב משולב, מצב חיוני, מצב נקי, מצב דינאמי ומצב שינה. כאשר המכשיר מחובר להתקן Bluetooth, לחצו פעמיים על לחצן ההפעלה  כדי להשמיע מוזיקה, ובזמן השמעת מוזיקה לחצו פעמיים על לחצן ההפעלה  כדי להשהות את המוזיקה.
2. במצב לחץ אוויר, לחצו על KM כדי לשנות את מצב לחץ האוויר. למכשיר יש שני מצבי לחץ אוויר: לחץ אוויר מהבהב או לחץ אוויר חכם. ניתן לעבור בין המצבים. ברירת המחדל היא לחץ אוויר מהבהב. כאשר אתם משמיעים מוזיקה לחצו פעמים על M כדי להשמיע את השיר הקודם. לחיצה ארוכה על M מגבירה את עוצמת השמע.
3. במצב חימום, לחצו על לחצן $^{\circ}\text{C}$ כדי לשנות את מצב הטמפרטורה. למכשיר שני מצבי טמפרטורה: נמוכה או גבוהה. ברירת המחדל היא גבוהה. כאשר אתם משמיעים מוזיקה, לחצו פעמיים על M כדי להשמיע את השיר הבא. השתמשו בלחצן הארוך כדי להחליש את עוצמת השמע.
4. שם ה-Bluetooth של המכשיר הוא **BP-X1100**. צמדו את מקור ה-Bluetooth בפעם הראשונה. לאחר שחיבור ה-Bluetooth הצליח, המכשיר יחובר ל-Bluetooth באופן אוטומטי כאשר תפעילו את ה-Bluetooth במכשיר.
5. כאשר המכשיר אינו פועל, התצוגה תיכנס למצב שומר מסך באופן אוטומטי לאחר 30 שניות. לחצו על כל לחצן במצב שומר מסך כדי להפעיל את המסך.

מצב אוטומטי



מצב חיוניות



מצב נקי



מצב דינאמי



מצב שינה



אחסון

טמפרטורה רגילה, סביבה ללא לחות, מאווררת היטב, בתוך מבנה.

שינוע

מכשיר זה כולל תכונות למניעת זעזוע, והוא מתאים להעברה באוויר, ברכבת, ברכב ובאוונייה. יש למנוע תנאים לא טובים כמו גשם, חשיפה לשמש, פגיעה או התנגשות. כאשר זמן האחסון עולה על שלושה חודשים, יש לבדוק את המכשיר, להוציא אותו מהקופסה ולהפעיל אותו למשך חצי שעה.

ביקיון ותחזוקה

ביקיון

לפני ביקיון המכשיר, כבו את המכשיר ונתקו אותו מזרם החשמל. השתמשו במטלית רכה ויבשה כדי לנקות את משטחי המכשיר.

⚠ אזהרה

בעת הביקיון, ודאו שהמכשיר כבוי. אל תשתמשו בחומרי ניקוי קורוזיביים כמו בנזין או טינר לניקוי המכשיר, מחשש לשינוי צבע, פגיעה במשטחים, נזק מבני וכו'.

תחזוקה

אם לא נעשה שימוש במכשיר למשך זמן ארוך, כסו אותו בכיסוי נגד אבק (ניתן גם להכין לבד), ושמרו אותו בחדר יבש ומאוורר כדי למנוע חשיפה לשמש.

הרחיקו את המכשיר מהישג ידם של ילדים ומנעו נזק אחר שעלול להיגרם משימוש במכשיר כצעצוע.

- אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית או בזמן נהיגה.
- אין להשתמש בעיסוי העיניים במקומות חמים ולחים.
- אנשים בעלי תסמינים של מחלות עיניים לא יכולים להשתמש במכשיר. מטופלים בבעיות עיניים כמו ניתוחים, גלאוקומה, קטרקט וניתוק רשתי צריכים להפסיק להשתמש במכשיר.
- מטופלים שעברו שבץ, או שסובלים מלחץ דם גבוה או לחץ דם נמוך, ישתמשו במכשיר בזהירות. היוועצו ברופא. אם אתם חווים אי נוחות במהלך השימוש במכשיר, הפסיקו את השימוש באופן מיידי.
- מטופלים הסובלים מפגיור שכלי, ישתמשו במכשיר תחת פיקוח והשגחה. אם אתם חווים אי נוחות במהלך השימוש במכשיר, הפסיקו את השימוש באופן מיידי.
- הימנעו משימוש אם צורכים אלכוהול.
- יש להסיר קרמים, סיכות, אביזרים לשיער וכו' לפני השימוש.
- מכשיר העיסוי הזה הוא מכשיר טיפוח אישי והוא אינו יכול להחליף תרופות או טיפולים רפואיים.
- אם אתם חשים כאב או אי נוחות במהלך השימוש, הפסיקו את השימוש באופן מיידי ופנו לרופא.
- מכשיר זה הוא מכשיר טיפולי ביתי ואין להשתמש בו לאבחון או למטרות מסחריות אחרות.
- אם נדרש ניקוי למכשיר, נגבו אותו במטלית הטבולה באלכוהול רפואי. אין לשטוף את המכשיר במים. אין לטבול אותו בנוזל כלשהו.
- אין לפרק את המכשיר בכוחות עצמכם.
- השתמשו במתאם המתח שנכלל באריזה ושימו לב לכללי בטיחות בחשמל.
- עצמו את עיניכם בעת השימוש במכשיר. לאחר השימוש המבט יהיה מטושטש ויתבהר כעבור 1-3 דקות.

פתרון תקלות ובעיות נפוצות

פתרון	סיבה אפשרית	תקלה
התחילו בשימוש לאחר טעינת הסוללה	מתח נמוך מדי	לא ניתן להפעיל
לחצו על לחצן Start למשך 3 שניות	לחיצה קצרה על לחצן Start	
שנו את חיבור הכבל	מיקום לא נכון של כבל USB	לא ניתן לטעון
טענו את המכשיר בעזרת מתאם 5v/1A	מתאם לא מתאים	
החליפו את הכבל או את המתאם	כבל או מתאם תקולים	
לחצו על לחצן °C כדי לעבור למצב הנכון	בדקו שמצב ההפעלה נכון	טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי
לחצו על כל לחצן כדי להפעיל את מסך ה-LCD	מצב שומר מסך	לא ניתן להציג את מסך ה-LCD
כבו את התקן ה-Bluetooth הלא רצוי והתחברו פעם נוספת.	ה-Bluetooth מחובר להתקן אחר	לא ניתן להתחבר ל-Bluetooth (אבל המסך פועל)

אל תפרקו או תתקנו את המכשיר ללא אישור. אם המכשיר ניזוק, על ידיכם או מישהו מטעמכם, החברה אינה אחראית לנזק.

תכולת האריזה

- 1 מכשיר עיסוי עיניים
- 1 כבל USB
- 1 מדריך למשתמש
- 1 מתאם

מפרט המכשיר

5V/1A	מתח טעינה	מכשיר עיסוי לעיניים	שם
GB4706.1-2005 GB4705.10-2008	תקן executive	3.7V ==	דירוג מתח
		4.5W	דירוג עוצמה

הצהרה

מתוך חדשנות ושיפור טכנולוגיית המכשיר, התוכן של המדריך למשתמש של אותו הדגם עשוי להיות כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האוירים המוצגים במדריך למשתמש מבוססים על מראה מכשיר העיסוי הרגיל ומיועדים למטרות המחשה בלבד.

המראה בפועל של המכשיר מבוסס על המכשיר שנרכש. בשל שיפורים במכשיר וסיבות אחרות, ייתכנו שינוי בפרמטרים מסוימים, לפרמטרים ששוננו אין השפעה על המכשיר. בדקו את המכשיר עצמו.

הזכות לפרש את התקנות השונות של מדריך זה שמורה ליצרן.

תעודת אחריות למוצרי ביקונקט טכנולוגיות בע"מ

שם משפחה _____ שם פרטי _____
 טלפון _____ כתובת _____
 פירוט הטובין/דגם _____ שנת ייצור _____
 מספר סידורי _____ מקום הרכישה _____
 מספר חשבונית _____ חותמת וחתימת בית העסק _____

תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של המוצר. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 10 (עשרה) ימי עבודה מיום הגעת המוצר למעבדת החברה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, יעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים. תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והתיקון במקרה כאמור יבוצע תוך שבועיים ממועד מסירת המוצר. לאחר ביצוע התיקון ו/או ההחלפה במוצר, ימסר לצרכן אישור בכתב שתפרט בו מהות התיקון ו/או מהות ההחלפה. אנו נהיה רשאים לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: שימוש בטובין בניגוד להוראות השימוש (לדוגמא: חיבור האוזניות למקור מתח ו/או הספק אשר אינו מיועד לאוזניות);

זדון או רשלנות של הצרכן (לדוגמא: נזק שנגרם כתוצאה מנדילת סוללות בתוך המכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים או שמן וכדומה, שבר שנגרם לאוזניות או למוצר); במקרה של תיקון שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו. כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן.

פרטי היבואן: **ביקונקט טכנולוגיות בע"מ**, ח.פ. 514849371
 ת.ד. 50 קריית עקרון מרכז ביל"ו IN צומת עקרון (ביל"ו סנטר) טלפון 08-9418222 פקס: 08-9418223
 דואר אלקטרוני info@bconnect.co.il ניתן להירשם לאחריות גם באתר www.bconnect.co.il
 שירות לקוחות ותמיכה טכנית 08-9403300; נקודת שירות ומעבדה מרכזית 08-9418222



רשימת נקודות שירות:

עיר	שם בית העסק	כתובת	טלפון	הערות
בילו סנטר	מרכז בילו IN	קומת קרקע צמוד ל-KSP	08-9418222	מעבדה ראשית ביקונקט
אשדוד	המרכז לתיקוני חשמל	המסחר 60 (מרכז מסחרי א)	08-8533976	תחנת איסוף
באר שבע	אי אר סלולר	מתחם ביג, חיל הנדסה 1	08-6990184	תחנת איסוף
בת ים	רדיו אלקטריק	בלפור 96 פינת יוספטל	03-5515960	תחנת איסוף
חדרה	אוטופון חדרה	צה"ל 34 מתחם מיקס	04-9862222	תחנת איסוף
חיפה	אוטופון תקשורת קריות	ההסתדרות 271	04-8227228	תחנת איסוף
חיפה	גל אלקטרוניקה	יפו 43	04-8516072	תחנת איסוף
טבריה	אלקטרון	הפרחים 9	04-6723091	תחנת איסוף
יבנה	Touch	מתחם קרסו, הנחשול 22	08-9954088	תחנת איסוף
ירושלים	אליפון	כ"ח 2, מרכז כלל	02-5380629	תחנת איסוף
כפר סבא	רדיו אלקטריק	ויצמן 72	09-7713586	תחנת איסוף
נהריה	י.ש תקשורת	קניון נהריה, אירית 2	04-9001049	תחנת איסוף
פתח תקווה	רדיו אלקטריק	חובבי ציון 16	03-7261883	תחנת איסוף
קרית שמונה	OMC	המכבים 6	04-6997273	תחנת איסוף
ראשון לציון	רדיו אלקטריק	גולדה מאיר 1, קניון שער-ראשון תחנה מרכזית	03-9619335	תחנת איסוף
רעננה	סימפון סלולר	קלאוזנר 2	09-7724372	תחנת איסוף
תל אביב	360	קניון צמרת G, ניסים אלוני 10	03-9202399	תחנת איסוף